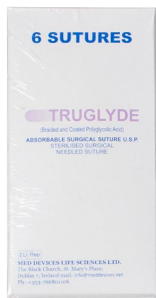




THD SLIDE

THD SUTURE	THD SLIDE	THD DOPPLER PROBE
		

Uso

THD Slide One está específicamente diseñado para ser usado con el THD Evolution/THD Revolution.

Descripción general

THD Slide es un anoscopio/proctoscopio diseñado para mejorar el procedimiento en el tratamiento de hemorroides de diferentes grados. Su especial diseño, reduce también la dolencia del paciente, aumentando la rapidez en los procedimientos. La forma del anoscopio/proctoscopio y su zona móvil, donde la sonda queda sujeta, permite una ligadura fácil con un prolapso menor. El anoscopio/proctoscopio THD está fabricado en policarbonato transparente de calidad médica, que permite, con su forma hecha de fibra de vidrio óptico, una perfecta visión en el campo de operación. El particular diseño del anoscopio/proctoscopio THD está diseñado para mantener una correcta posición dentro del ano durante la operación, con un soporte para el porta-agujas THD. El soporte de la sonda Doppler dentro del anoscopio/proctoscopio, está en contacto con la mucosa del ano para poder detectar la arterias hemorroidales. El THD Slide Box contiene 2 sondas Doppler, con 5 usos cada una. La caja también contiene 10 box (6 suturas por paquete) y 10 THD esponjas anales hemostáticas.

