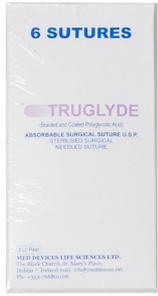




# THD SLIDE

<b>THD SUTURE</b>	<b>THD SLIDE</b>	<b>THD DOPPLER PROBE</b>
		

## Uso

THD Slide One está específicamente diseñado para ser usado con el THD Evolution/THD Revolution.

## Descripción general

THD Slide es un anoscopio/proctoscopio diseñado para mejorar el procedimiento en el tratamiento de hemorroides de diferentes grados. Su especial diseño, reduce también la dolencia del paciente, aumentando la rapidez en los procedimientos. La forma del anoscopio/proctoscopio y su zona móvil, donde la sonda queda sujeta, permite una ligadura fácil con un prolapso menor. El anoscopio/proctoscopio THD está fabricado en policarbonato transparente de calidad médica, que permite, con su forma hecha de fibra de vidrio óptico, una perfecta visión en el campo de operación. El particular diseño del anoscopio/proctoscopio THD está diseñado para mantener una correcta posición dentro del ano durante la operación, con un soporte para el porta-agujas THD. El soporte de la sonda Doppler dentro del anoscopio/proctoscopio, está en contacto con la mucosa del ano para poder detectar la arterias hemorroidales. El THD Slide Box contiene 2 sondas Doppler, con 5 usos cada una. La caja también contiene 10 box (6 suturas por paquete) y 10 THD esponjas anales hemostáticas.



Dimensiones	
THD SLIDE	
Tamaño interna	27x19 mm
Tamaño externa	33x23 mm
Longitud operativa	100 mm
Tamaño ventana lateral (modificable)	30x10 mm minima
Longitud total del proctoscopio	172 mm
Longitud mango	105 mm

THD SLIDE				
Cód.	Cant.	Descripción	Clase de riesgo	EMDN
800066-10	10	THD Slide	-	-
<i>con</i> 710004	10	THD Slide (esterilizado)	IIa	Z12020604
<i>con</i> 800056	2	Sondas doppler Slide (5 usos)	IIa	Z12059005
<i>con</i> 880000	10	6 Agujas en curva con suturas absorbable	III	H0101010201
<i>con</i> 800050	10	Scrofolon Anal (esterilizado)	III	M040503

DISPOSITIVOS CONECTADOS		
Cód.	Cant.	Descripción
800133	1	THD REVOLUTION