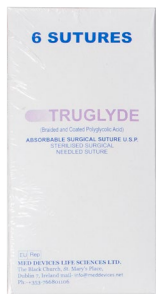




THD SLIDE ONE KIT

THD SUTURE	THD SLIDE	THD DOPPLER PROBE
		

Uso

THD Slide One está específicamente diseñado para ser usado con el THD Evolution/THD Revolution.

Descripción general

THD Slide es un anoscopio/proctoscopio diseñado para mejorar el procedimiento en el tratamiento de hemorroides de diferentes grados. Su especial diseño, reduce también la dolencia del paciente, aumentando la rapidez en los procedimientos. La forma del anoscopio/proctoscopio y su zona móvil, donde la sonda queda sujeta, permite una ligadura fácil con un prolapso menor. El anoscopio/proctoscopio THD está fabricado en policarbonato transparente de calidad médica, que permite, con su forma hecha de fibra de vidrio óptico, una perfecta visión en el campo de operación. El particular diseño del anoscopio/proctoscopio THD está diseñado para mantener una correcta posición dentro del ano durante la operación, con un soporte para el porta-agujas THD. El soporte de la sonda Doppler dentro del anoscopio/proctoscopio, está en contacto con la mucosa del ano para poder detectar la arterias hemorroidales. El THD Slide One Box contiene 10 sondas Doppler, que pueden usarse de manera inmediata sin esterilizarse. La caja también contiene 10 box (6 suturas por paquete) y 10 Anal Spon esponjas anales hemostáticas.



Dimensiones	
THD SLIDE	
Tamaño interna	27x19 mm
Tamaño externa	33x23 mm
Longitud operativa	100 mm
Tamaño ventana lateral (modificable)	30x10 mm minima
Longitud total del proctoscopio	172 mm
Longitud mango	105 mm

THD SLIDE ONE			
Cód.	Cant.	Descripción	Clase de Riesgo
800065-10	10	THD Slide One Kit	
incluye 710004	10	THD Slide (esterilizado) – con 1 proctoscopio, 1 porta agujas, 1 empujador.	Ila
incluye 800063	10	Sondas doppler Slide Desechable (esterilizado)	Ila
incluye 800050	10	Scrofolon Anal (esterilizado)	III
incluye 880000	10	Envase de suturas (6 suturas - estériles)*	III
o			
incluye 880000	10	Envase de suturas (6 suturas - estériles)**	III

*KIT que incluye suturas Truglyde

**KIT que incluye suturas Assufil

THD Slide One (Sterile)		
Cód.	Cant.	Descripción
800065-1	1	THD SLIDE ONE KIT
800065-5	5	THD SLIDE ONE KIT
800065-10	10	THD SLIDE ONE KIT



Ficha técnica

REF. 800065 - 10

REF. 800065 – 5

REF. 800065 - 1

ES

DISPOSITIVOS CONECTADOS		
Cód.	Cant.	Descripción
800133	1	THD REVOLUTION
800000	1	THD EVOLUTION

THD360025_ES_Rev02_20250218_THD Slide One

THD S.p.A. Via per Carpi, 15/B 42015 Correggio (RE), Italy – Tel +39 0522 634311 – www.thdlab.com

Administrative Offices Via per Carpi 26/B, 42015 Correggio (RE), Italy
Reg. Imp., Cod. Fisc. & VAT IT02111430357 – Capitale Sociale € 4.000.000,00 I.V.