



THD SURGY STERILE DESECHABLE



Uso

El THD SURGY es un dispositivo medico ESTÉRIL y DESECHABLE para la investigación y cirugía del canal anal.

Descripción general

Su diseño compacto permite un fácil acceso al ano, por lo tanto una buena dilatación y una retracción suave de la mucosa, sin ningún trauma para el esfínter. La hendidura lateral ancha permite una visualización óptima del canal anal y mejora el campo operatorio.

El diseño asimétrico estira lateralmente el canal anal

y evita el prolapso de la mucosa.


THD Surgy se fabrica con materiales plásticos transparentes de alta calidad de grado médico y está diseñado para conectarse a un iluminador, a través de la punta doblada de fibra óptica específicamente diseñada.

Características

- Hecho de policarbonato médico.
- Cumple con los requisitos de biocompatibilidad estándar de ISO 10993
- Se puede utilizar con fibra óptica THD curva.
- Listo para usar
- Ligero (40 gr)
- Dispositivo CE
- Pack individual.
- Sin látex
- Esterilizado con óxido de etileno.

Ventajas

- No necesita otras herramientas.
- Amplia iluminación.
- Estéril y totalmente desechable
- Elimina el riesgo de contaminación.
- Compacto y fácil de usar

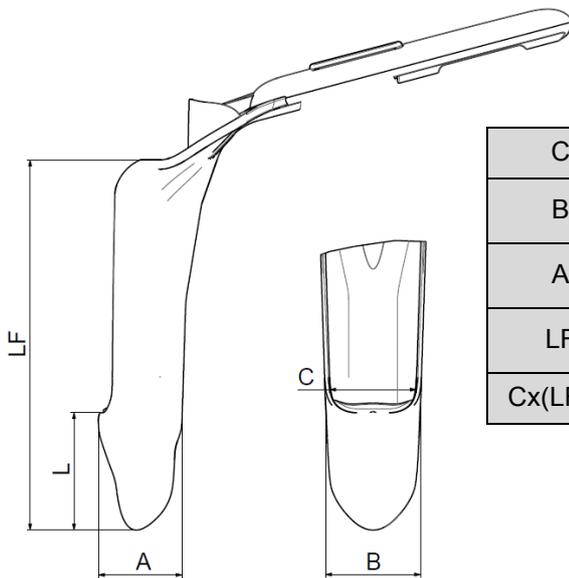

		Surgy mini	Surgy Maxi
C	Luz interna	23 mm	28 mm
B	Dimensión externa	26 mm	31 mm
A	Dimensión externa	23 mm	27 mm
LF	Longitud del dispositivo	122 mm	122 mm
Cx(LF-L)	Ventana	23x85 mm	28x85 mm



Una vez finalizado el uso, eliminar el anoscopio THD Light-Scope como un residuo hospitalario, de conformidad con la legislación vigente.



En caso de que el anoscopio THD Light-Scope provisto de LED se deba eliminar antes del uso (por ejemplo, porque esté caducado o dañado), no eliminarlo con los residuos genéricos. Contiene componentes eléctricos.

THD Surgy Sterile		
Cód.	Cant.	Descripción
800004	10	THD Surgy Mini sterile
800005	10	THD Surgy Maxi sterile