




THD BANDY

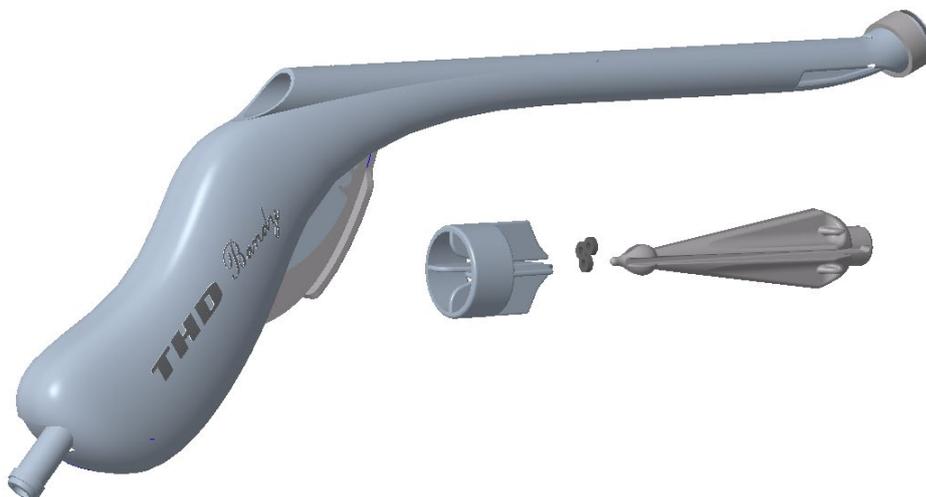

Uso

THD BANDY es un producto sanitario de un solo uso para el tratamiento de la patología hemorroidal de 2° grado.

Descripción general

THD Bandy es un equipo compuesto por un ligador elástico de succión, 4 anillos elásticos y un sistema para la carga de los elásticos, listo para utilizar.

THD Bandy se conecta a un sistema de aspiración y permite controlar la cantidad de tejido aspirado a través de una apertura que permite aspirar o liberar la mucosa.

El diseño del mango permite utilizar el producto con una sola mano, así como una liberación del elástico rápida y segura.

Características

- Fabricado en policarbonato de grado médico
- Conforme a los requisitos de biocompatibilidad establecidos por la norma ISO 10993
- Se suministra con 4 anillos de un solo uso
- Sistema de carga rápida de los anillos
- Listo para el uso
- Ligero y manejable
- Dispositivo CE de clase IIa
- Envasado individualmente
- Sin látex



Ventajas

- Se puede utilizar con una sola mano
- Carga fácil del elástico

Dimensiones	
Longitud excluida la empuñadura	150 mm
Diámetro interno de la boca	10 mm
Diámetro conexión aspirador	8 mm

THD Bandy			
REF.	Cant.	Descripción	Clase de riesgo
800079-10	10	THD Bandy	IIA
<i>incluye</i>	/	10 Ligador de un solo uso	
<i>incluye</i>	/	10 Cono de carga	
<i>incluye</i>	/	10 Empujador para carga de los anillos	
<i>incluye</i>	/	40 Elásticos para ligadura	

THD360067_ES_Rev00_20191210_THD_Bandy.doc