




THD BANDY

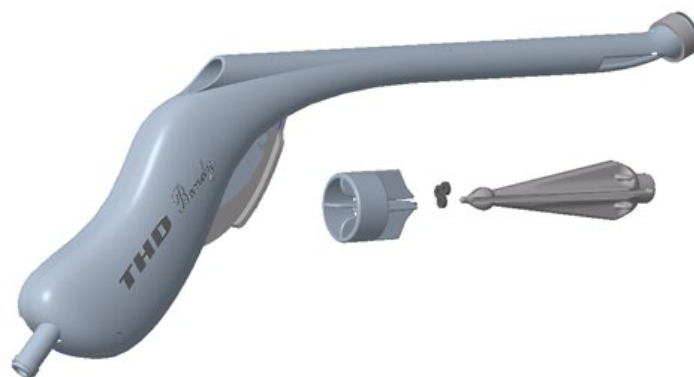

Uso

THD Bandy (ref. 800183) es un dispositivo médico de Clase IIa de acuerdo con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE que consta de un aglutinante hemorroidal, un dispositivo médico desechable junto con un cono y un empujador. THD Bandy es destinado para el tratamiento de la patología hemorroidal de 2º grado.

Descripción general

THD Bandy (ref. 800183) es un dispositivo médico listo para usar que consta de una ligadura elástica junto con un cono y un empujador.

El dispositivo médico THD Bandy es un ligante elástico de succión desechable equipado con un sistema de carga de anillos elásticos que se suministran por separado..

THD Bandy se conecta a un sistema de aspiración y permite controlar la cantidad de tejido aspirado a través de una apertura que permite aspirar o liberar la mucosa.

El diseño del mango permite utilizar el producto con una sola mano, así como una liberación del elástico rápida y segura.

Características

- Fabricado en policarbonato de grado médico
- Conforme a los requisitos de biocompatibilidad establecidos por la norma ISO 10993
- Se suministra con anillos de un solo uso




- Sistema de carga rápida de los anillos
- Listo para el uso
- Ligero y manejable
- Dispositivo CE de clase IIa
- Envasado individualmente
- Sin látex

Ventajas

- Se puede utilizar con una sola mano
- Carga fácil del elástico

Dimensiones (ref. 800183)

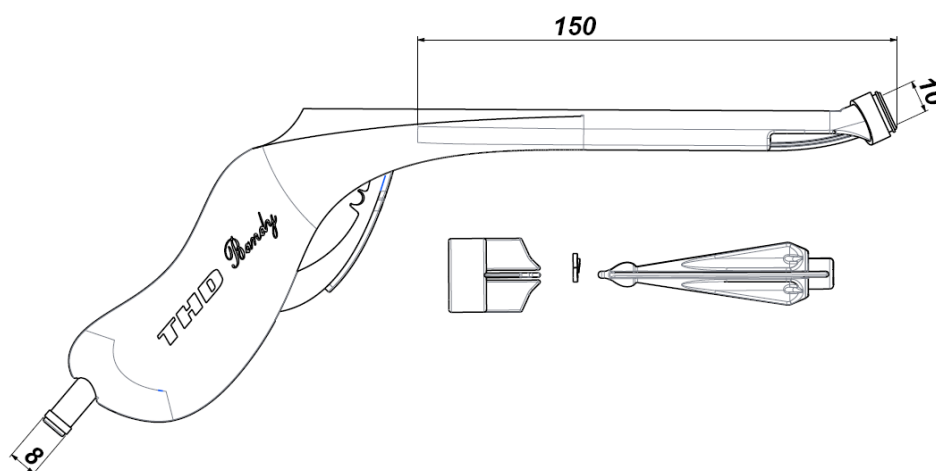

Longitud excluida la empuñadura

150 mm

Diámetro interno de la boca

10 mm

Diámetro conexión aspirador

8 mm

THD Bandy

REF.	Cant.	Descripción	Clase de riesgo
800183	25	THD Bandy (dispositivo médico) compuesto por: Ligador de un solo uso Cono de carga Empujador de carga	IIA

Acesorios compatibles

Producto	Descripción
Elásticos para ligadura	-Material: Isopreno -Diámetro interior: 1.9mm -Diámetro exterior: 4.5mm