



THD SLIDE ENV (LIGHT)

THD SLIDE ENV	THD DOPPLER PROBE
	


Uso

THD Slide One está específicamente diseñado para ser usado con el THD Evolution/THD Revolution.

Descripción general

THD Slide es un anoscopio/proctoscopio diseñado para mejorar el procedimiento en el tratamiento de hemorroides de diferentes grados. Su especial diseño, reduce también la dolencia del paciente, aumentando la rapidez en los procedimientos. La forma del anoscopio/proctoscopio y su zona móvil, donde la sonda queda sujeta, permite una ligadura fácil con un prolapso menor. El anoscopio/proctoscopio THD está fabricado en policarbonato transparente de calidad médica, que permite, con su forma hecha de fibra de vidrio óptico, una perfecta visión en el campo de operación. El particular diseño del anoscopio/proctoscopio THD está diseñado para mantener una correcta posición dentro del ano durante la operación, con un soporte para el porta-agujas THD. El soporte de la sonda Doppler dentro del anoscopio/proctoscopio, está en contacto con la mucosa del ano para poder detectar la arterias hemorroidales. El THD Slide Box contiene 1 sonda Doppler, con 10 usos cada una y 1 porta-agujas THD reutilizable.

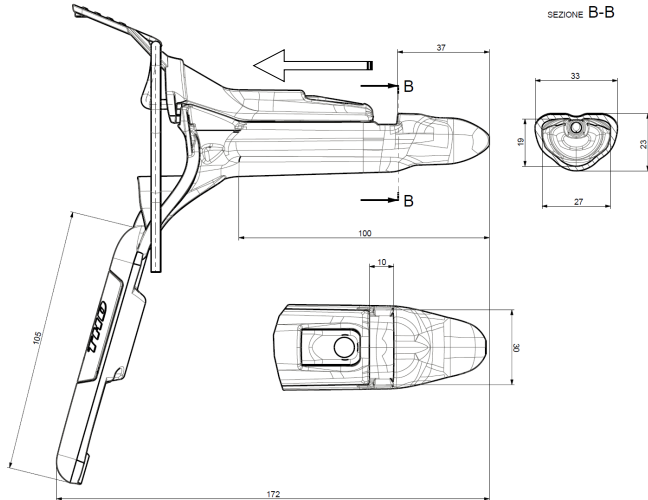

Dimensiones	
THD SLIDE ENV (LIGHT)	
	
Tamaño interna	27x19 mm
Tamaño externa	33x23 mm
Longitud operativa	100 mm
Tamaño ventana lateral (modifiable)	30x10 mm minima
Longitud total del proctoscopio	172 mm
Longitud mango	105 mm

THD SLIDE ENV (LIGHT)		
Cód.	Cant.	Descripción
800169-10	10	THD Slide Env (Light)
con 710004	10	THD Slide Env (esterilizado) en una bolsa – con 1 proctoscopio, 1 empujador.
con 700001	1	Sondas doppler Slide (10 usos)
con 750001	1	porta agujas reutilizable

DISPOSITIVOS CONECTADOS		
Cód.	Cant.	Descripción
800133	1	THD REVOLUTION
800000	1	THD EVOLUTION