




# THD FACE MASK

## THD F3 whitebarrier

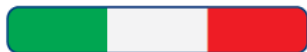

Made in Italy



NOTA: Las imágenes tienen el único propósito de presentar el producto; Consulte la tabla de códigos de producto para conocer las variantes disponibles.

### CLASIFICACIÓN:

Producto Sanitario de Clase I según el Reglamento (UE) 2017/745.

### TIPO:

Mascarilla quirúrgica de **tipo II**, de un solo uso, no estéril, sin látex.

### FINALIDAD PREVISTA:

**THD Face Mask – THD F3 whitebarrier** es un producto sanitario no estéril, desarrollado para reducir las emisiones de los agentes infecciosos desde la nariz y la boca del personal sanitario y/o de portadores asintomáticos o de pacientes con síntomas clínicos.

### DESCRIPCIÓN:

**THD F3 whitebarrier** está clasificada como mascarilla quirúrgica de tipo II según la norma EN 14683 y es útil para cubrir nariz, boca y mentón de quien la lleva, quedándose bien ajustada a la cara.

**THD F3 whitebarrier** ha sido desarrollado expresamente **para limitar la transmisión de agentes infecciosos desde la nariz y la boca del personal sanitario y/o de portadores asintomáticos o de pacientes con síntomas clínicos** con una Eficacia de la Filtración Bacteriana (BFE) mayor a 99%, gracias a su material de 3 capas en tela no tejida (TNT) de polipropileno y poliéster y su filtro interno.

Gracias a su excelente eficacia de la filtración bacteriana y a su máxima comodidad, **THD F3 whitebarrier** se identifica como una solución válida en respecto a:

- **Comodidad:** su capa en contacto con la piel es suave y no abrasiva. Los elásticos blandos aseguran que la mascarilla se quede bien ajustada a los lados de la cara, de una manera muy confortable.
- **Protección:** la capa interna garantiza la eficacia de filtración bloqueando más del 99% de la penetración de los agentes infecciosos.
- **Alta transpirabilidad:** el material permite un buen flujo de aire en ambas direcciones.

### CARACTERÍSTICAS:


- Excelente resistencia a la penetración bacteriana con **poder de filtrado BFE > 99%**
- Buena porosidad al aire que garantiza una **alta transpirabilidad**
- Excelente ajuste y elásticos cómodos
- Fabricada con tela no tejida de 3 capas
- Adaptador nasal adaptable, útil para reducir el empañamiento de las gafas
- Buena resistencia a la tracción longitudinal y transversal del material
- Ultraligera
- Hipoalergénico
- Nivel de contaminación (bioburden): inferior a 30 CFU/g

**MATERIAL:** Tela No Tejida (TNT) – Spunbond/Meltblown

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:** polipropileno, poliéster



DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO/USO:

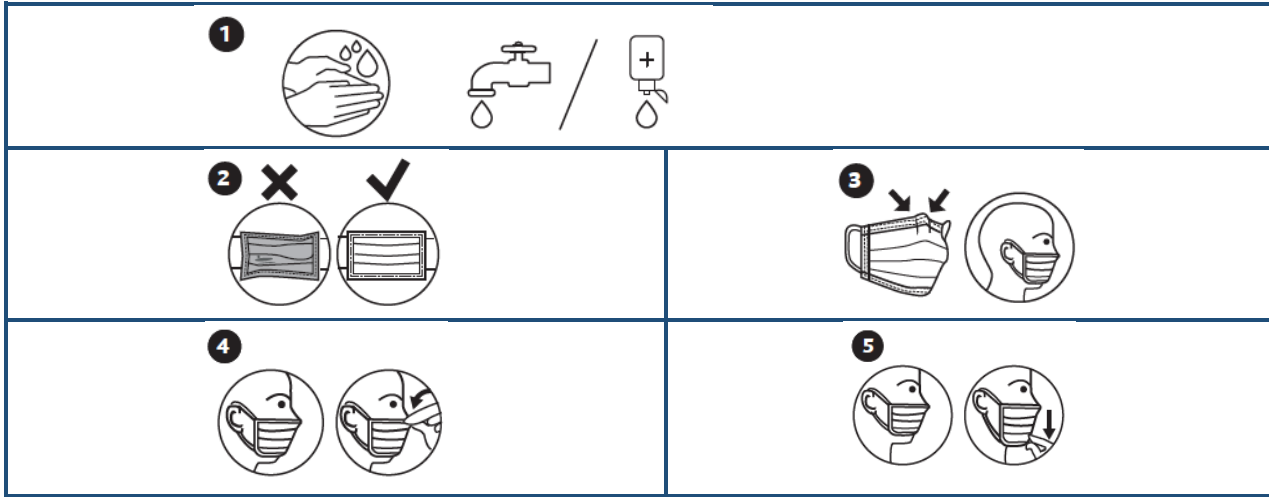

**MANTENIMIENTO:** No necesario, producto de un solo uso.

**ALMACENAMIENTO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** almacenar a temperatura ambiente, sin exponer a humedad o calor directo.

**INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD:** No usar en caso de daños obvios como tejido dañado, perforado o descosido.

**CONTRAINDICACIONES:** No hay contraindicaciones especiales en el uso de este producto medico.

**TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN:** No hay observaciones particulares acerca del transporte.

El producto no usado tiene que ser depositado en los residuos sólidos.

El producto usado tiene que ser depositado:

- En ámbito doméstico, en los residuos mezclados.
- En ámbito hospitalario/profesional, en los oportunos recipientes para residuos médicos peligrosos de carácter infeccioso.

Características THD Face Mask – THD F3 whitebarrier			
Tallas	Regular Fit	Small Fit	Junior
Dimensiones - Longitud	17,5 cm	14,5 cm	14,5 cm
Dimensiones – Altura (mascarilla plegada)	9,5 cm	9,5 cm	9,5 cm
Bandas elásticas - Longitud	Standard	Standard	Junior
Material	3 capas de TNT polipropileno / poliéster: - capa exterior y capa de contacto con la piel en TNT Spunbond - capa intermedia con propiedades filtrantes en TNT Meltblown		
Color	Blanco por fuera y por dentro		
Esterilización	No Estéril		
Estándares aplicados	EN14683 / ISO10993-1		
Clasificación producto	Producto Sanitario de Clase I según el Reglamento (UE) 2017/745		
Clasificación EN14683	Mascarilla de uso médico de Tipo II		
Eficacia de la filtración bacteriana (EFB)	> 99%		
Presión diferencial (Pa/cm²)	< 40		
Carga microbiana	≤ 30 CFU/g		

REF	Nombre	Descripción	Talla	Cant.
800247	THD FACE MASK F3 50 B M R	THD F3 whitebarrier - 50 pz - Regular	Regular Fit	50 pz
800243	THD FACE MASK F3 20 B M R	THD F3 whitebarrier - 20 pz - Regular	Regular Fit	20 pz
800248	THD FACE MASK F3 20 B M S	THD F3 whitebarrier - 20 pz - Small	Small Fit	20 pz
800259	THD FACE MASK F3 20 B M J	THD F3 whitebarrier - 20 pz - Junior	Junior	20 pz